

ULTRAFORMER *MPT*

APOSTILA DE ESTUDOS



SUMÁRIO

Anatomia Facial	1
Processo de envelhecimento	3
Ultraformer	5
<i>Fundamentos</i>	6
<i>Mecanismo de ação</i>	10
<i>Procedimento e parâmetros</i>	14
<i>Cuidados</i>	16
<i>Contraindicações e efeitos adversos</i>	17
<i>Guia de tratamento</i>	21
<i>Ultraformer MPT</i>	33
<i>Casos clínicos</i>	43

ULTRAFORMER

DIFERENCIAIS

- Comparando o Ultraformer com outras tecnologias que também geram calor no tecido, temos algumas diferenças importantes no seu modo de ação:
 - É a única tecnologia capaz de alcançar uma profundidade de até 13mm
 - A energia é disparada de forma precisa na camada alvo, mantendo a epiderme INTACTA
 - E a energia é entregue de modo fracionado, criando micropontos de coagulação que proporcionam um maior efeito de CONTRAÇÃO (efeito lifting)

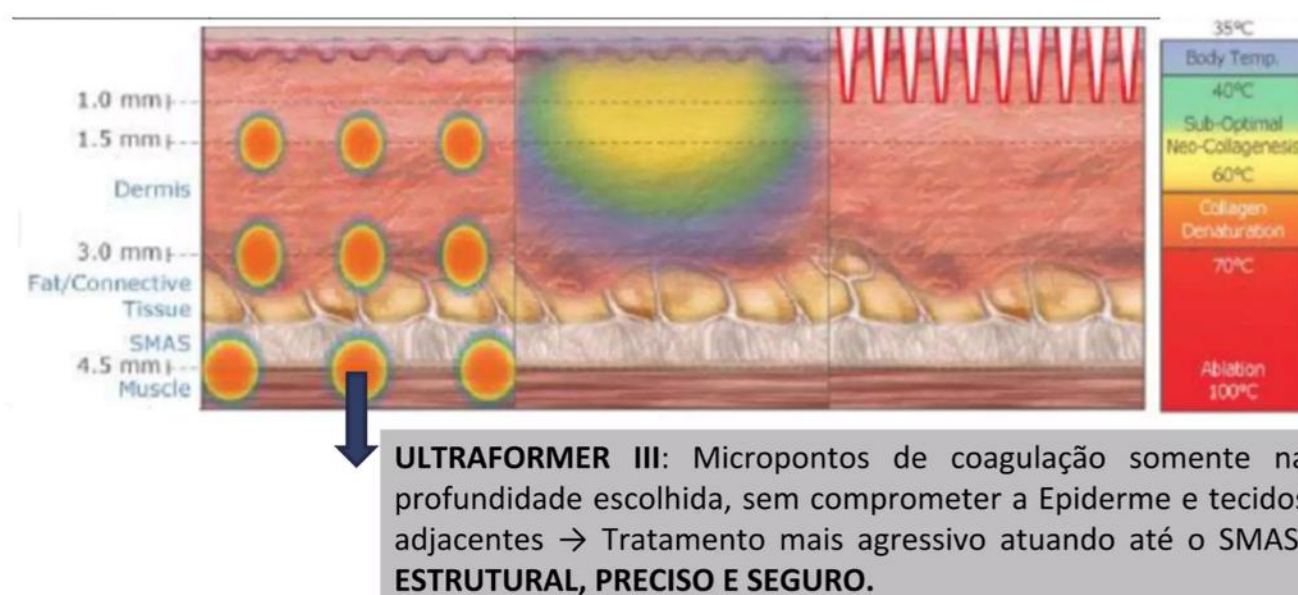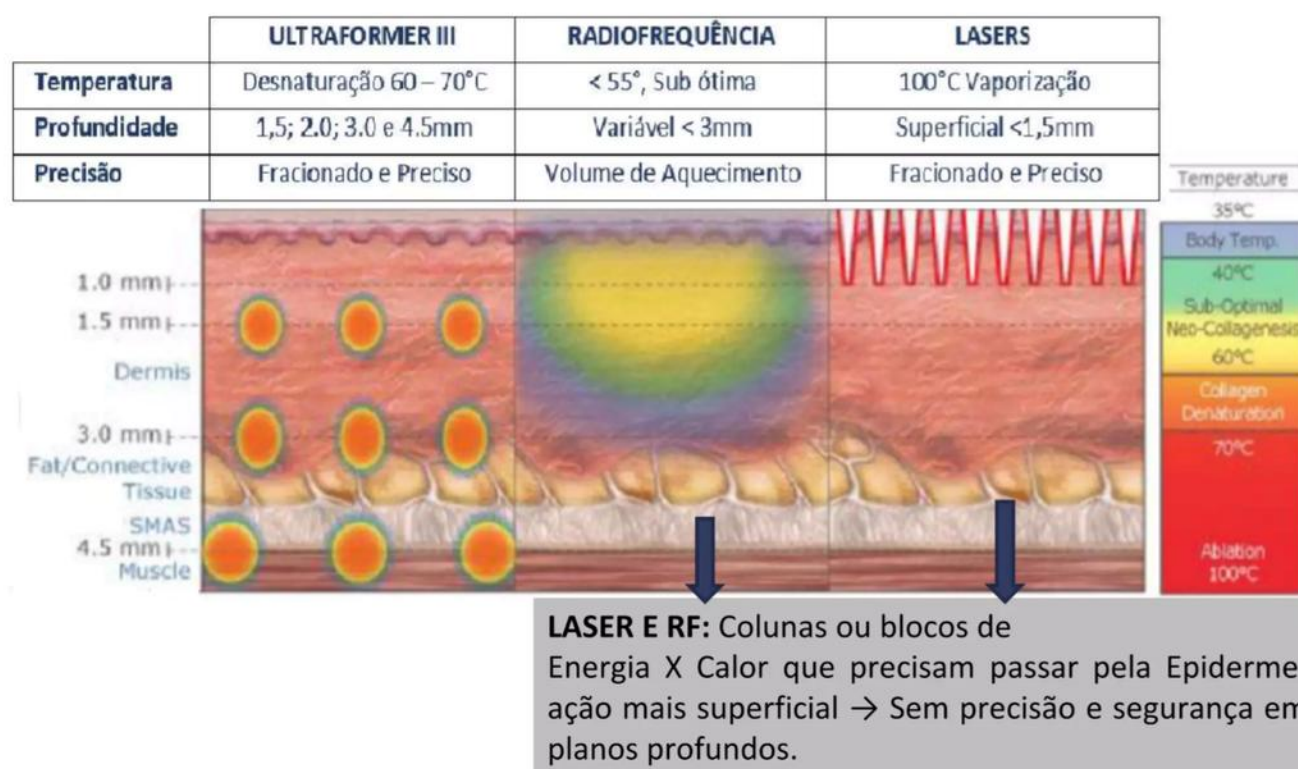

ULTRAFORMER

PARÂMETROS

- **Pitch:** distância entre os pontos de coagulação
 - Esse parâmetro também pode ser usado para aumentar a entrega de energia por disparo = quanto menor o pitch, maior a potência = maior a inflamação no tecido
 - Regiões pequenas e de pele fina, como as pálpebras, que não podem receber grandes quantidades de Joules -> diminuir o pitch para aumentar a eficácia do tratamento
 - Para gordura, também é interessante usar um pitch menor

Interface Gráfica do Usuário



- **Length:** comprimento do disparo
 - As ponteiros são marcadas com um comprimento padrão de 25 mm
 - É recomendado não mexer nesse parâmetro
- O tratamento pode ser feito no **modo single (disparo único)** ou no **modo repeat (disparos repetidos)**
- O número de disparos com cada ponteira pode ser programado no alarme

BÔNUS — GUIA RÁPIDO DE PARÂMETROS
Material complementar que acompanha o curso



U L T R A F O R M E R

Guia Rápido de Parâmetros

PESCOÇO

Total = 280 disparos

PONTEIRA	MODO	ENERGIA	PITCH	DISPAROS
Linear 4,5mm	Normal	0.8 - 1.0J	1.5mm	80
Linear 3mm	Normal	0.5-0.8J	1.5mm	70
Booster 3mm	MP	0.5 - 0.8J	-	70
Booster 1,5mm	MP	0.2 - 0.3J	-	60

*Se a paciente tiver uma pele muito fina, não utilizar a ponteira 4,5mm. E acrescentar os disparos correspondentes às outras ponteiras.

Prévia — os demais protocolos estão no material completo do curso.



Ultraformer MPT

DA TÉCNICA À AGENDA CHEIA

**Essa é apenas uma pequena prévia
de todo o material que você terá
acesso.**

Além da apostila didática, você recebe todo o material complementar:

- **Guia rápido de parâmetros**
- **TCLE**
- **Ficha de acompanhamento**
- **Biblioteca de artigos científicos**
- **Casos clínicos**
- **e muito mais.**

Volte à página e garanta a sua vaga.